

Hebe- und Pflegehilfen



MOBILE LIFTER • LIFTER FÜR SELBSTSTÄNDIGEN TRANSFER • DECKENLIFTER • UMHÄNGE-DECKENLIFTER
WANDLIFTER • SCHWIMMBADLIFTER • HIPPOThERAPIE • BADE- UND DUSCHLIEGEN

Inhaltsverzeichnis

Handi-Move International



- Die richtige Lösung für jeden Benutzer 2 - 5
- Eine Firma in Bewegung 6 - 7
- Partner Ihres Vertrauens! 8 - 9
- Ein optimaler Service 10 - 11
- Was die Nutzer dazu sagen 12 - 15
- In allen Umständen 16 - 21

Körperunterstützung



- Der Hebebügel 22 - 23
- Beinstützen 24 - 25
- Hebetücher 26 - 29
- Handi-Einhängevorrichtung 30 - 31

Heben & Versorgen



- Der Mobile Lifter Victor 32 - 33
- Der Mobile Lifter 1640/1641/1630 34 - 35
- Der aktive mobile Lifter 36 - 37
- Der Deckenlifter 38 - 39
- Der Umhänge-Deckenlifter 40 - 41
- Deckeninstallationen 42 - 45
- Der Bettstand 47
- Der Wandlifter 48 - 49
- Der Schwimmbadlifter 50 - 51
- Handi-Umlagerungshilfen 52 - 53
- Der Dusch-und Badetrolley 54 - 55

Zubehör



- Der Transportwagen für Umhänge-Deckenlifter 56
- Die Waage 57




Die richtige Lösung für jeden Benutzer

Eine weltweite Präsenz

Handi-Move bietet seine Dienstleistungen und Produkte weltweit an. Sowohl in Europa, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan sind unsere Fachmitarbeiter täglich aktiv, um den Benutzern von Rollstühlen, deren Betreuern, Ärzten und Therapeuten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Überall strebt Handi-Move danach, mit seinen Hebe- und Versorgungssystemen dem Benutzer die größtmögliche Bewegungsfreiheit und den Betreuern die kleinstmögliche körperliche Belastung zu bieten. Jede Situation wird getrennt betrachtet.

Erfahrungen werden auf einer weltweiten Basis ausgetauscht. Dadurch verfügt Handi-Move über ein ungewöhnlich großes Knowhow, welches an jedem Tag weiter wächst. Auf diese Weise hat Handi-Move bereits mehrere Zehntausend Lösungen realisiert.

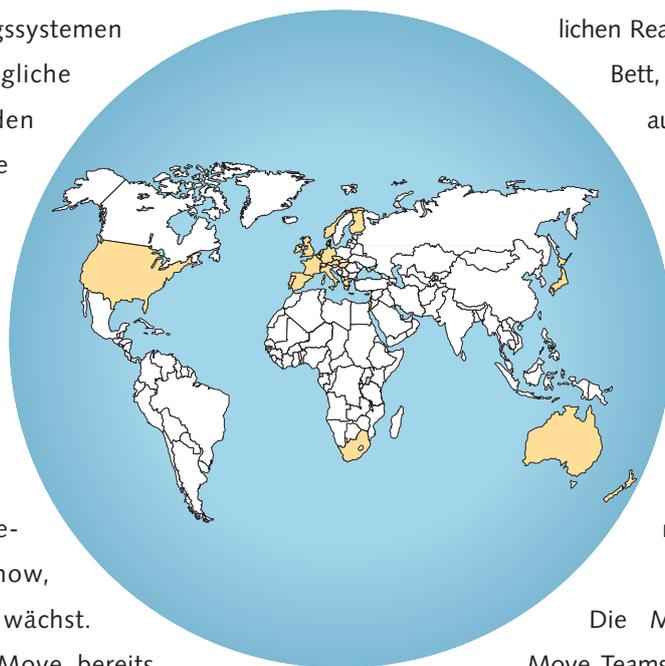

Für zu Hause, in der institutionellen Pflege und in Einrichtungen für behinderte Menschen

Die Lösungen von Handi-Move waren von Anfang an ein großer Erfolg in Pflegeeinrichtungen und privaten Haushalten. Die Hebe- und Versorgungssysteme machten den Begriff "Autonomes Wohnen" für Tausende von Benutzern zu einer täglichen Realität. Eine Verlegung ins Bett, ins Bad oder Umsetzen auf die Toilette ist für sie und ihre Begleiter kein Hindernis mehr. Handi-Move betrachtet es als Herausforderung, für jedes Hebe- und Transferproblem eine geeignete Lösung zu realisieren.

Die Mitglieder des Handi-Move Teams arbeiten weltweit sehr eng mit einer Vielzahl von Pflegeeinrichtungen,

Krankenhäusern, Altenheimen und Betreuungszentren für Menschen mit einem Handicap usw. zusammen. Die Hilfsbedürftigen und ihre Begleiter stehen dabei immer an erster Stelle. Jedes Heben, jeder Transfer und jede Versorgungshandlung muss für sie unter möglichst optimalen Bedingungen verlaufen. Darum haben wir die richtige Beratung bei der Einrichtung von Gebäuden zu unserer Priorität gemacht. Handi-Move arbeitet deshalb auch mit Architekten und Planungsbüros zusammen. Letztendlich steht oder fällt eine perfekte Einrichtung bereits in der Phase des Entwurfs und der Planung.

Im Interesse des Nutzers

Bei Handi-Move dreht sich alles um den Kunden, nämlich den Nutzer. Dies ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Jede neue Anfrage ist eine Herausforderung, um eine geeignete und individuell zugeschnittene Lösung zu finden. Jedem Kunden fachlich die beste Beratung zukommen zu lassen ist unser Ziel. Die beste Lösung muss deshalb nicht die teuerste sein, ganz im Gegenteil: Handi-Move denkt im Sinne des Nutzers und bietet fundierte Lösungen an, welche jeweils mit der Philosophie der Firma Handi-Move und seiner Vertriebspartner übereinstimmt.

Partner für den Nutzer

Ein Handi-Move Berater betrachtet sich selbst in erster Linie nicht als Verkäufer, sondern als Berater und Partner. Er begleitet den Nutzer vom ersten Beratungsgespräch bis zur Installation des Systems. Der Entwicklungsprozess wird von ihm von A bis Z überwacht und nach der Installation weist er den Nutzer in die optimale Handhabung des Systems ein. Der Service nach der Installation erfolgt durch die eigenen Mitarbeiter. Sie machen es sich zur Aufgabe, Ihnen auch später behilflich zu sein.



Die Basis von Handi-Move wurde durch den Gründer René Van Raemdonck an den Tag gelegt, an dem er zusammen mit einer universitären Forschungsgruppe ein besseres neuartiges Hebesystem für einen befreundeten Rollstuhlfahrer und seine Frau entwarf. Auch wenn Handi-Move inzwischen zu einem Unternehmen mit Stützpunkten in der ganzen Welt herangewachsen ist, bleibt die Grundeinstellung nach wie vor die Selbe: Für den Benutzer eines Rollstuhls oder für das Betreuungspersonal innovative Hebe- und Versorgungssysteme zu entwickeln, welche sich perfekt an deren Bedürfnissen orientieren.

Die beste Vorbeugung gegen Rückenprobleme

Die Handi-Move Hebeseysteme bieten nicht nur eine hervorragende Lösung für Menschen mit einer verminderten Mobilität, sondern große Vorteile sind auch in ihrer direkten Umgebung in Bezug auf Angehörige und pflegende Personen festzustellen. Die Lifter und Transportsysteme verhindern damit Rückenprobleme, die durch körperliches Heben verursacht werden.

Die Mission und Vision von Handi-Move

Für Handi-Move kommt die Lebensqualität des Nutzers an erster Stelle. Die Firma betrachtet es als ihre Mission, innovative und zuverlässige Hebe- und Versorgungssysteme zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die die Autonomie und Lebensqualität des Nutzers erhöhen.

Ninove, 1 Oktober 1982



Die Handi-Move-Geschichte

1982

Im Oktober 1982 wird die Firma Handi-Move gegründet. Die Firma geht von einem gänzlich neuen Konzept beim Anheben von Menschen mit einer motorischen Behinderung aus. Der Hebebügel mit den "Helfenden Händen" genießt ein weltweites Patent.

1983

Handi-Move nimmt mit seinen Produkten zum ersten Mal an einer internationalen Messe teil. Die international renommierte REHA-Messe in Düsseldorf ist dafür das Schaufenster.

1986

Handi-Move bringt seinen ersten elektrisch angetriebenen mobilen Lifter auf den Markt, der für den patentierten Handi-Move Hebebügel konzipiert wurde.

1989

Handi-Move präsentiert den ersten Deckenlifter, der komplett in eigener Regie entwickelt wurde.

1995

In der Produktionshalle läuft der erste Wandlifter vom Band. Seine große Tragkraft und Flexibilität machen diesen Hebelifter sofort zu einem großen Erfolg.

1999

Handi-Move zieht mit seinen Büros und Produktionsstätten in ein neues Betriebsgebäude an den Rand der Stadt Ninove, Belgien.

2001

Handi-Move arbeitet inzwischen weltweit mit einem Team von mehr als 100 spezialisierten Mitarbeitern. Mit seinem breiten Produktsortiment kann die Firma nun so gut wie jedes Hebe- und Transferproblem sowohl im privaten als auch im institutionellen Bereich lösen.

2002

Handi-Move erweitert seine Produktpalette und lanciert den tragbaren Umhänge-Deckenlifter

2004

Handi-Move führt den neuen HM2500 Deckenlifter ein

2007

Handi-Move organisiert das zweite Company Weekend. Mitarbeiter aus der ganzen Welt feiern 25 Jahre Erfolg. Neue innovative Produkte werden vorgestellt, welche die Position von Handi-Move als Marktführer sichern.





Wer mit einem Mitarbeiter von Handi-Move in Kontakt kommt, spürt sofort sein großes Engagement. Handi-Move ist eine Firma mit sehr engagierten Mitarbeitern. Alle arbeiten eigenverantwortlich an der am besten geeigneten Lösung für die vielen Bewegungsprobleme von Rollstuhlnutzern, mit denen sie und das Pflegepersonal täglich konfrontiert werden. Handi-Move hat ein entsprechendes Potential an Knowhow aufgebaut und stellt dieses Wissen gerne zur Verfügung.



Eine Firma in Bewegung

Ingenieure an der Arbeit

Handi-Move ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Hebe- und Transfersystemen. Die Firma verfügt über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ein Team von Ingenieuren sucht ständig nach Antworten auf die Anforderungen im Markt. Die von ihnen entwickelten Prototypen werden dann umfangreichen und strengen Tests unterworfen. Handi-Move will sicher sein, dass ein neues Produkt perfekt den gestellten Erwartungen entspricht, bevor es angeboten wird.

Ein spezialisiertes Produktionsteam

Die Produktionsabteilungen von Handi-Move werden von gut ausgebildeten und erfahrenen Fachspezialisten geführt. Das Produktionsteam hat eine Leidenschaft für Perfektion entwickelt. Schon seit Jahren sorgen sie dafür, dass jedes von der Fabrik gelieferte Hebesystem einer umfangreichen Reihe von Qualitätserfordernissen entspricht. Alle Produkte sind CE zertifiziert.



Keine Verkäufer, sondern Berater

Der Aufgabenbereich eines Handi-Move Beraters ist sehr vielschichtig: Er wird Sie besuchen, lässt sich erklären wie Sie leben, welche Bewegungsabläufe Sie bewältigen müssen und ermittelt welches Hebesystem für Sie am besten geeignet ist.

Der Handi-Move Mitarbeiter erarbeitet zusammen mit Ihnen einen Vorschlag für das am besten geeignete Hebesystem, welches Ihren konkreten Problemlösung entspricht. Dieser Basisplan wird dann im Betrieb einer Reihe von sehr strengen Beurteilungskriterien unterworfen.

In dem erarbeiteten Vorschlag werden den Einschränkungen und Möglichkeiten ihres Lebensraums Rechnung getragen. In einem ausführlichen Angebot erhalten Sie dann ein ganz genaues Bild von dem, was die Installation kosten wird. Nach



der Lieferung des Hebesystems erhält der Nutzer eine ausführliche und praktische Einarbeitung.

Unser Handi-Move Mitarbeiter zeigt ihnen ebenfalls Schritt für Schritt, wie Sie das Hebesystem optimal nutzen.

Schulung für die Pflegekräfte

Auf Anfrage schult Handi-Move vor Ort Pfleger und Betreuer.





Handi-Move bietet in jeder Phase der Zusammenarbeit dem Nutzer einen perfekten Service. Deshalb entwickelte Handi-Move eine Betriebsphilosophie, die auf 'Erreichbarkeit' und 'Klarheit' basiert. Vom ersten Rat bis hin zum letzten Benutzertipp, alles erfolgt in einer offenen Atmosphäre. Ganz egal was ihr Problem ist, Handi-Move hat immer einen Mitarbeiter, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Eine zuverlässige Begleitung beim Kauf, eine aufmerksame Bearbeitung der Bestellungen und ein professioneller Kundendienst, dies sind für Handi-Move ganz wichtige Punkte.



Partner Ihres Vertrauens!

Partner der Architekten und Planungsbüros

Das Bauen von Pflege- und Wohnräumen für Menschen mit einem motorischen Handicap ist keine einfache Angelegenheit. Architekten und Planungsbüros müssen mit sehr speziellen Erfordernissen rechnen. Die Hebeseysteme werden am besten bereits in der Phase eines Baukonzepts mit eingeplant. Unsere Mitarbeiter stehen den Architekten und Planern gerne mit entsprechender Beratung zur Verfügung.



Kostenlose Beratung und Erprobung

Ein Hebeseystem kann noch so toll sein, es hilft Ihnen jedoch nicht, wenn es nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Deshalb ist es immer gut, dass Sie sich erst gründlich informieren. Unsere Handi-Move Berater kommen gerne zu Ihnen. Unsere Empfehlungen basieren auf einer gründlichen Kenntnis der Materie und einer reichen Erfahrung.

So können Sie sicher sein, dass Sie ein maßgeschneidertes Hebeseystem erhalten, welches Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst ist.

Selbstverständlich kommt unser Berater mit einer Hebelösung zu Ihnen, in Ihre vertraute Umgebung, so dass Sie dieses System selbst einem kritischen Test unterziehen können.

Klare Information

Detaillierte Angebote

Jedes Angebot zeigt ein deutliches Bild vom Umfang und Preis der ausgearbeiteten Hebelösung. Handi-Move möchte vermeiden, dass Sie nach dem Kauf noch mit unerwarteten Ausgaben konfrontiert werden.

Umfangreiche Bedienungsanleitung

Jedes Handi-Move System wird von einer ausführlichen und bebilderten Bedienungsanleitung begleitet. Darin finden Sie die entsprechenden Erklärungen zu den verschiedenen Bestandteilen der Lifter und wie das Hebesystem gesteuert werden kann. Die Bedienungsanleitung gibt Ihnen nützliche Tipps für die Nutzung und Instandhaltung. Außerdem finden Sie hier die Anschrift des zuständigen Handi-Move Mitarbeiters für weitere Informationen.

Schritt-für-Schritt Schulung

Nach der Lieferung sorgt der Handi-Move Berater für eine zuverlässige Einweisung. Er zeigt dem Benutzer und allen anderen damit arbeitenden Personen Schritt für Schritt, wie das System richtig funktioniert.

Garantiebedingungen / Gewährleistung

Alle Handi-Move Hebesysteme und Zubehörteile genießen die besten Garantiebedingungen.





Für Handi-Move endet die Zusammenarbeit mit dem Kunden nicht bei der Lieferung des Produkts. Ein gutes Hebesystem kann nur dann optimal funktionieren, wenn es auch gut installiert und gewartet wird. Unser eigenes Team von erfahrenen Spezialisten bürgt dafür. Und wir sind immer dann da, wenn Sie unsere technische Hilfe wünschen.



Ein optimaler Service

Ein eigenes technisches Team

Einwandfreie Installation

Für die Installation Ihres Hebesystems verfügt Handi-Move über ein eigenes Team von erfahrenen Installateuren. Sie sorgen für den einwandfreien Betrieb des Hebesystems. Dank der vorgefertigten Teile und einer genauen Planung erfolgt die Installation zügig und in einem Minimum an Zeit.

Tests nach der Installation

Unsere Installateure testen alles aus, nachdem das System installiert wurde. Fragen Sie unsere Mitarbeiter auch um Rat. Ihr technisches Wissen ist groß und sie helfen Ihnen gerne mit vielen praktischen Tipps.


Schnelle technische Hilfe

Handi-Move kommt zur Instandhaltung oder Reparatur Ihres Hebesystems. Wir stimmen einen Termin mit Ihnen ab und führen die erforderlichen Arbeiten kurzfristig aus, falls notwendig auch bei Ihnen vor Ort.

Vom Plan bis zur Installation

Handi-Move bietet von der Planung bis zur Realisierung einen Komplettservice. Sie haben es also stets nur mit einem Partner zu tun. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles genau nach Absprache und gemäß der gemeinsamen Planung verläuft.



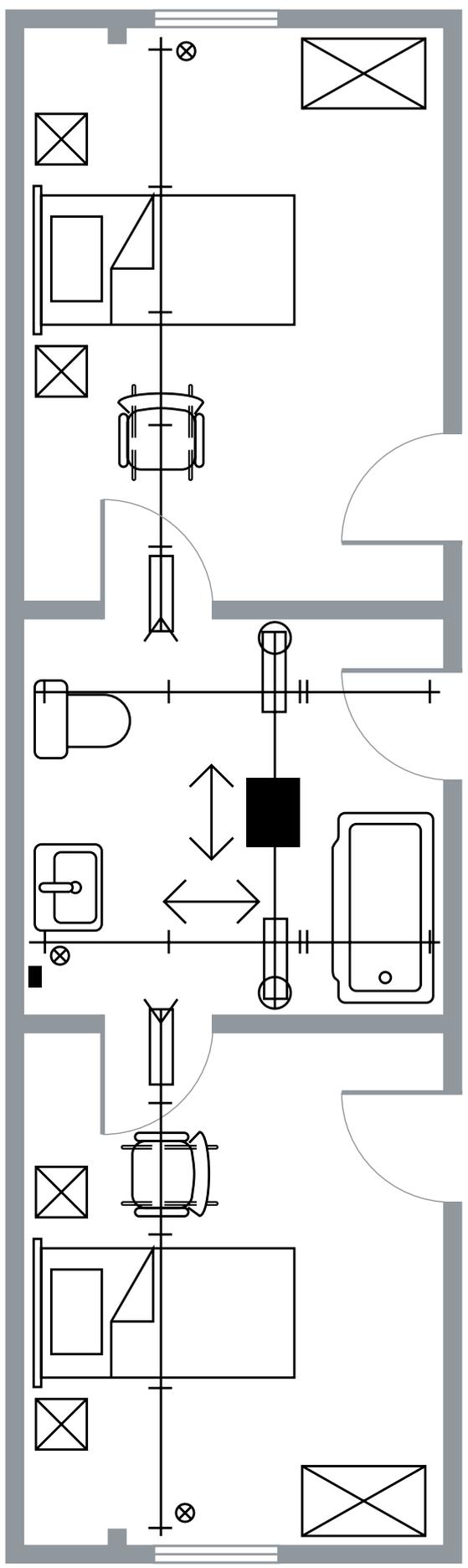

Was die Nutzer unserer

“Handi-Move gibt mir ein großes Gefühl der Sicherheit.”

“Ich leide an der Friedreich’schen Ataxie und bin auch die Vorsitzende der Vereinigung von Ataxiepatienten in der Wallonie. Seit 13 Jahren kann ich mich nicht mehr ohne Rollstuhl bewegen. Vor 5 Jahren ließ ich Handi-Move eine Schiene mit Deckenmotor in meinem Badezimmer installieren. Für mich hat das Hebesystem nur Vorteile. Nun kann ich ganz allein von meinem Rollstuhl auf die Toilette oder in das Bad

Der spezielle Hebebügel von Handi-Move, der an dem Deckenmotor angebracht ist, hebt meinen Oberkörper und meine Beine ohne Probleme an. Meine Sitzfläche, meine Arme und die Unterbeine bleiben dabei frei. Beim Toilettengang oder beim Baden ist dies ein großer Vorteil.

Der Hebebügel und das Hebesystem haben mir unerwarteter Weise einen anderen Vorteil gegeben. Es passiert ab und zu, dass ich in dem Badezimmer aus meinem Rollstuhl falle. Ohne Hilfe würde ich niemals wieder in den Rollstuhl gelangen. Aber jetzt ziehe ich mich bis an den Hebelift und lasse den Bügel bis auf den Boden sacken. Ich hebe mich dann von selbst wieder an. Dies gibt mir ein großes Gefühl von Sicherheit. Mein Freund kann mich nun unbesorgt alleine lassen. Früher war das nicht so selbstverständlich. Ich bin echt glücklich, dass ich die essenziellen Dinge des Lebens nun ganz alleine erledigen kann. Und ich habe wirklich keine Lust um für diese Sachen wieder von anderen abhängig zu werden. Handi-Move hatte seine Technologie an mein Leben angepasst, und ich habe mich ohne Probleme an ihre Technologie gewöhnt.”

Nathalie Wieers, Vorsitzende des ABAF in Flawinne



Hebesysteme dazu sagen

“Handi-Move arbeitet schnell und fachgerecht.”

“Die Heimstätte für motorisch Behinderte “Facere” hat mehr als 30 Bewohner. Wir verfügen über 3 mobile Patientenlifter von Handi-Move in mehreren Räumen, und im Schwimmbad Handi-Move Deckenlifter. Alle Geräte werden hier sehr intensiv benutzt. Für uns ist es äußerst wichtig, dass diese Geräte sehr robust sind und wir mit einem zuverlässigen Wartungsdienst rechnen können.

Beim Vergleich vom Preis und Qualität waren die Handi-Move Produkte an erster Stelle. Das Material ist von hervorragender Qualität, und die Wartungstechniker von Handi-Move arbeiten schnell und fachgerecht. Ich bin sehr zufrieden mit Handi-Move, und das dürfen alle wissen.”

Jacqueline Noldé, Direktorin eines Instituts in Anderlecht



“Vor zwei Jahren hat mir die Firma Handi-Move einen fahrbaren Deckenlifter mit Hebebügel eingebaut. Damit werde ich als Querschnittgelähmter C 5/6 mühelos in die Lage versetzt, völlig selbständig von meinem falt-Rollstuhl in meinen Elektro-Rollstuhl umzusteigen.

Die Einrichtung arbeitet seither problemlos und absolut wartungsfrei. Sie hat damit sehr wesentlich zu einer Verbesserung meiner Lebensqualität beigetragen.”

Dr. H.-J. Mast, Württemberg

“Seit 1995 besitze ich eine Handi-Move Deckenlifteranlage und ich habe dadurch meine Selbständigkeit wieder erlangt.

Ich bin sehr abhängig von der Anlage. Und es ist wichtig, dass ein guter und schneller Service vor Ort ist. In diesem Punkt kann ich nur lobende Wort sagen, auch die anfängliche Beratung und die Montage der Anlage war ohne jede Beanstandung.”

Friedericke Eich, Altdorf

Was die Nutzer unserer

“Handi-Move spielt eine zentrale Rolle in meiner Wohnung.”

“Ich war 22 als ich an einem regnerischen Mittag mit einem Bekannten zur Arbeit fuhr. Wegen Wasserglätte geriet der Wagen plötzlich ins Schleudern. Während des Unfalls wurden zwei Genickwirbel verschoben, und seitdem bin ich teilweise gelähmt.

Meine neue Situationen brachte sehr viel Einschränkungen mit sich. Für eine ganze Reihe von Sachen musste ich plötzlich mit der Hilfe von Anderen rechnen. Meine Mutter hat von all dem Heben einen Bandscheibenvorfall bekommen. In dem neuen Haus, dass ich zusammen mit meinem Freund habe bauen lassen, wollte ich so autonom wie möglich leben und mich bewegen können.

Handi-Move spielt in der Einrichtung meiner Wohnung eine zentrale Rolle. Mit dem Deckenlifter und dem besonderen Hebebügel kann ich ohne Hilfe in mein Bett, ins Bad, in die Dusche oder auf die Toilette.

Ich bin mit dem Handi-Move Hebebügel sehr zufrieden. Ich hatte das System im Universitätskrankenhaus kennen gelernt. Der Hebebügel gibt mir eine größere Freiheit und ist für mich eine bessere Lösung als das Hebetuch. Bevor ich das Gerät bestellte, erhielt ich den Hebebügel für zwei Wochen zur Probe. Handi-Move hat mir auch noch einen besonderen Stützgürtel für die Beine gemacht, sodass ich noch besser unterstützt werde.

Ich muss auch sagen, dass mein Vertreter ganz hervorragend ist. Wenn ich ihn benötige, dann steht er sofort an meiner Tür.”

Isabelle Vermeulen, Heule



Hebesysteme dazu sagen

“Ein schnelles Service ist für uns von allergrößter Wichtigkeit.”

“Vor sechs Jahren ließen wir an unserem Haus einen angepassten Lebensraum für unseren Sohn Thomas bauen.

In seinem Zimmer haben wir ein Querschienensystem installieren lassen, wodurch wir unseren Sohn an jeder beliebigen Stelle anheben und überall wieder absetzen können: in seinem Bett, im Bad, auf dem Versorgungstisch, dem Rollstuhl, usw.

Mit diesem System bringen wir Thomas vom Wohnzimmer bis in unser Schwimmbad im Garten.

Eine gute Dienstleistung ist für uns von allergrößter Wichtigkeit. Falls etwas mit der Installation schief geht, müssen wir mit einem schnellen Service rechnen können. In diesem Bereich hat mich Handi-Move echt überzeugt.”

Valère Corthouts, Vater von Thomas, Koersel





Handi-Move fühlt sich in allen Bereichen zu Hause, wo sich Personen mit einer Behinderung bewegen. Das Unternehmen richtet sich nicht nur an den Benutzer selbst, sondern an jeden, dem Bewegungsfreiheit viel bedeutet. Unsere Mitarbeiter bieten Therapeuten, Pflegeheimen und Rehabilitationszentren, Betreuern zu Hause und Sportzentren Beratung und logistische Unterstützung. Handi-Move hat dabei immer nur ein Ziel vor Augen: die Lebensqualität des Benutzers und seines Betreuers so komfortabel wie nur möglich zu gestalten.



In allen Umständen

Bewegungsfreiheit im eigenen Haus Selbstständige Nutzung

Mithilfe des Hehebügels und eines Deckensystems kann so mancher mit wenig oder ohne Hilfe den Abstand zwischen Bett, Badezimmer und Toilette zurücklegen.

Betreutes Wohnen

Jedes Haus ist anders und deshalb manchmal mehr und manchmal weniger für die Lösungen geeignet, die in verschiedenen Einrichtungen verwendet werden. In Einrichtungen werden meist mobile Lifter eingesetzt, in einer häuslichen Situation eignen diese sich allerdings meist weniger.



Der Platz fehlt, es gibt Hindernisse zu überbrücken, das Badezimmer ist zu klein, es gibt Türschwellen... In der häuslichen Umgebung kann ein mobiler Lifter Probleme verursachen.

Handi-Move hat sich auf kundenspezifische Lösungen für den Einsatz im häuslichen Bereich spezialisiert. So kann ein durchgehendes Deckenschienensystem entworfen und montiert werden, um einer preisgünstigen und effizienten Transfer zwischen Bett, Badezimmer, Toilette,... zu ermöglichen.

Wenn die Zimmer weit auseinander liegen, sich in mehreren Stockwerken oder in verschiedenen Häusern oder Gebäuden befinden, können der Handi-Move Wandlifter und der tragbare Umhänge-Deckenlifter genau die richtige Lösung sein. Da sie nicht schwer sind, lassen sie sich bequem transportieren.





Schulen & Tagesheime

In öffentlichen Schulen oder Privatschulen sind Toilettenpausen oder persönliche Hygiene häufig der Anlass für den Transfer von Schülern mit einer Behinderung. Der Handi-Move Hebebügel und das Hebetuch eignen sich für diese Zwecke hervorragend. Beide Lösungen bieten dem Betreuer großzügigen Zugang zum Gesäß des Benutzers, während der komfortabel im Lifter sitzt. Handi-Move besitzt umfangreiche Erfahrungen und passende Lösungen für kleine Toiletten, die typisch sind für viele Schulen. Alle Handi-Move-Systeme erlauben es, den Benutzer bis auf die Matten im Klassenzimmer oder in der Sporthalle abzusenken.



Dauerpflege

Transfer ins Bett und aus dem Bett, sowie in die Badewanne oder in die Dusche finden in Pflegeheimen am häufigsten statt. Mobile Lifter und aktive Hebelifter werden wegen ihrer Vielseitigkeit in solchen Umgebungen am häufigsten eingesetzt. Dagegen bietet die Nutzung eines Deckensystems im Badezimmer dem Betreuer auf nassen Böden zusätzliche Sicherheit und dem Benutzer einen schnelleren und komfortableren Transfer in und aus dem Bad und auf die Toilette.



Krankenhaus

Außerdem hat man die Sicherheit, dass immer ein Liftsystem zur Verfügung steht. In Pflegesituationen mit mehr Platz besitzt die zu pflegende Person häufig ein eigenes Badezimmer neben ihrem eigenen Zimmer. In diesen Fällen stellt eine Stehhilfe eine kompakte und schnelle Lösung für den Toilettenbesuch u.Ä. dar.

In Krankenhäusern werden eine Vielzahl an Liftsystemen und Zubehör benötigt, um allen Anforderungen zu genügen. Ein Handi-Move-Wandlifter kann sich dort als ideal erweisen, wo man einen Patienten auf einen Bestrahlungs- oder Operationstisch heben muss und kein Platz für mobile Lifter oder Deckensysteme vorhanden ist. Ein tragbarer Deckenlifter kann in Patientenzimmern eine perfekte und preisgünstige Lösung sein. Handi-Umlagerungshilfen sind beliebte Hilfsmittel, um Patienten umzulagern oder ihnen bei halbambulanten Tätigkeiten zu helfen.





Freizeit

Dank der Schwimmbadlifter von Handi-Move kann man eine Person problemlos ins oder aus dem Wasser heben und das direkt vom Rollstuhl in das Schwimm- oder Therapiebad. Für Schwimmbäder hat Handi-Move einen ausgeklügelten, in einer Bodenhülse schwenkbaren Lifter. Es können aber auch decken- oder wandgestützte Systeme verwendet werden. Ein Deckenlifter, der vorschriftsgemäß über dem Schwimmbad montiert ist, in Kombination mit dem Handi-Move Hehebügel, ermöglicht Geh- und Schwimmtherapie.





Reiten ist bei vielen Menschen mit einer Behinderung eine besonders beliebte Therapie. Das Auf- und Absitzen vom Pferd geht mit dem Handi-Move Hebebügel und dem Deckenlifter ganz leicht.

Urlaub wird angenehmer, wenn das Hotelzimmer mit einem Hebelifter von Handi-Move ausgestattet ist. Einige berühmte Hotels in Las Vegas haben ihre Zimmer bereits angepasst.





Der Handi-Move Hebebügel hebt den Nutzer, ähnlich wie die Mutter ihr Kind. Obwohl der Körper nur an wenigen Punkten unterstützt wird, besteht trotzdem ein Gefühl von Komfort und Sicherheit. Der Hebebügel ist besonders einfach anzulegen und bietet dem Nutzer vielfältige Möglichkeiten.



Der Hebebügel Helfende Hände

WIE MIT HÄNDEN GETRAGEN

Autonomer Transfer

Jeder, der einen Handi-Move Deckenlifter mit Fahrtrieb zur Verfügung hat und seine Arme und Hände benutzen kann, hat mit dem Handi-Move Hebebügel einen ausgezeichneten Partner, um sich selbst innerhalb seines Lebensraumes zu bewegen.

Schwimmtherapie

Mit dem Hebebügel und einem Handi-Move Schwimmbadlifter kann der Benutzer direkt vom Rollstuhl ins Wasser rein und rausgehoben werden.

Ideal für die Toilette

Weil das Gesäß vollkommen frei ist, kann man sich sehr einfach An- und Auskleiden.

Hippotherapie

Mit dem Hebebügel kann ein Reiter mühelos auf den Rücken eines Pferdes gehoben und auch wieder abgesetzt werden. Dank des einzigartigen Trägersystems ist die Sitzfläche vollkommen frei.




Einfach zu befestigen

Die Befestigung des Handi-Move Hehebügels ist einfach und doch sicher. Er kann leicht vom Handi-Move Liftersystem abgekoppelt werden, falls eine andere Körperunterstützung (Tuch oder Gurt) eingehängt werden soll. Die Begleiterin oder der Begleiter benötigen dabei kein Werkzeug und keine extra Hilfe.

Sicher und hygienisch

Der Hehebügel ist aus leichtem und stabilem Edelstahl gefertigt. Er kann problemlos einer Belastung von 182 kg ausgesetzt werden. Der Hehebügel nimmt keine Feuchtigkeit im Bad oder Schwimmbad auf. Nach der Entfernung aus dem Wasser mit einem Tuch abwischen und er ist sofort wieder sauber und trocken.

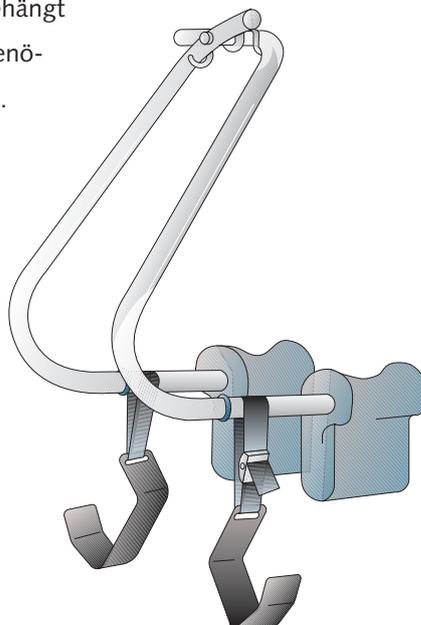

Komfortabel

Anheben mit dem Hehebügel ist Heben ohne Mühe. Zwei "Hände" umfassen den Oberkörper des Nutzers (nicht unter den Achseln). Der Druck auf den seitlichen Thorax (Brustkorb), der sich durch die seitlichen Stützen ("Hände") aufbaut, wird bestimmt durch das Körpergewicht des Nutzers. Diese seitlichen Stützen sorgen außerdem für eine gleichmäßige Druckverteilung. Zwei Beinstützen auf denen die Oberschenkel lagern, bestimmen die aufrechte Sitzposition.

Mit diversen Handi-Move Hebeliftern



Beinstützen

FÜR EIN BESSERES ANHEBEN

Beim Anheben einer Person mit einem Hebebügel sind Beinstützen ein unentbehrlicher Bestandteil. Sie machen es möglich, den Druck und das Körpergewicht gleichmäßig zu verteilen. Außerdem sorgen sie dafür, dass der Körper sich während des Hebevorgangs im Gleichgewicht befindet und dass der Rücken möglichst gerade bleibt. Die Beinstützen sind relativ einfach anzubringen und sind aus einem wartungsfreundlichen und rostbeständigen Material gefertigt.

Für jedes Handicap die richtige Beinstütze

Die standardmäßige Beinstützen

Abhängig von der Art des Handicaps ist es wichtig, die richtige Beinstütze auszuwählen. Die standardmäßigen Beinstützen sind allgemein einsetzbar und sind in einer glatten oder in einer Antirutschausführung erhältlich. Sie werden bei Menschen mit einer normalen Sitzfunktion eingesetzt.

Runde Beinstützen

Diese sind für Menschen mit einer verminderten Sitzfunktion vorgesehen. Wegen der runden Form, die um das Bein passt, ist die Kontaktfläche zwischen Stütze und Bein größer. Der Oberschenkel wird zwischen einem Drittel bis zur Hälfte unterstützt, wobei die Stütze bis an das Sitzbein heranreicht.

Beinstützen für Muskeldystrophie

Handi-Move empfiehlt diese Beinstützen bei Muskeldystrophie und bei Menschen mit einem stark verminderten Muskeltonus, wie z.B. bei bestimmten schlaffen Muskelerkrankungen. Sie sind den standardmäßigen Beinstützen ähnlich, haben aber ein Verlängerungsstück, das den Oberschenkel bis zur Kniekehle unterstützt. Außerdem wird die Beinstütze zusätzlich mit einem Klettband am Oberschenkel befestigt.



Maße und Ausführungen

	NORMAAL			ANTI-RUTSCH		
	S	M	L	S	M	L
Standard	•	•*	•	•	•	•
Runde					•	
Muskeldystrophie	•	•		•	•	

* Überzüge für Beinstützen sind erhältlich





Menschen mit einem geschwächten Muskeltonus bzw. die keine Nackenkontrolle haben, finden nur ungenügende Unterstützung in einem Hebebügel. Hier bieten die Hebetücher von Handi-Move eine perfekte Alternative. Die Hebetücher sind in den unterschiedlichsten Formen und Größen für fast jedes Handicap lieferbar.



Hebetücher

FÜR JEDE SITUATION DAS RICHTIGE HEBETUCH

Weich und stabil

Die Beinlaschen der Hebetücher sind mit weichen Polstern versehen und sorgen so für eine bessere Verteilung der Druckbelastung. Außerdem verhindern diese, dass sich der Stoff im Bereich der Oberschenkel zusammenrollt. Die Materialien die Handi-Move benutzt sind stabil, pflegeleicht, frei von Schadstoffen und sehr langlebig.

Die Hebetücher sind in einem Netzstoff, Volltextil und PVC erhältlich. Der Netzstoff, auch Mesh (ohne Polster an den Beinlaschen) genannt, hat den Vorteil das er atmet, wasserdurchlässig ist und schnell trocknet. Die Hebetücher sind in der Maschine bei 60° waschbar und können in einem Haushaltstrockner bei mittlerer Temperatur getrocknet werden. Die Tücher sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Ab Lager lieferbar

Die Hebetücher von Handi-Move sind ab Lager lieferbar.



Für einen schnellen Transfer

Der Transfer in und aus dem Bett, dem Bad, auf die Toilette, in und aus dem Rollstuhl oder der Dusche, verläuft dank der angepassten Hebetücher von Handi-Move sehr leicht und schnell. Die Hebetücher können durch unterschiedliche Schlaufenpositionen für eine Verlegung in Sitz- oder Liegehaltung benutzt werden, eignen sich aber auch für individuelle Zwischenpositionen. Die Hebetücher sind mit und ohne Kopfstütze erhältlich.

Professionelle Beratung

Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl Ihres Hebetuchs. Handi-Move bietet Ihnen immer eine passende Lösung.



① Das Standard-Hebetuch

Universell einsetzbar

Das Standard-Hebetuch von Handi-Move ist überall einsetzbar. Es unterstützt den Körper vollkommen und hat eine Öffnung für den Toilettengang. Das Hebetuch wird an einer Vierpunkteinhängenvorrichtung eingehängt, wodurch eine komfortable Sitz- oder Liegeposition erreicht wird. Die gepolsterten Beinlaschen fühlen sich weich an und bieten gleichzeitig eine ideale Unterstützung. Diese Polsterung sorgt dafür, dass sich der Stoff des Tuches nicht zusammenzieht. Die Handgriffe auf der Rückseite machen eine Positionierung beim Absetzen einfacher. Die Hebetücher sind mit und ohne mondförmiger Kopfstütze lieferbar. Die verstärkte Kopfstütze bietet auch eine seitliche Stütze für den Kopf. Das standardmäßige Hebetuch ist erhältlich in Volltextil oder Netzmaterial, sowie mit und ohne gepolsterten Beinlaschen. Die Version ohne Polster ist ideal, falls der Benutzer/Patient im Rollstuhl auf dem Hebetuch verbleibt. Die Hebetücher von Handi-Move sind selbstverständlich einfach anzulegen.

② Das Toilettenhebetuch

Für das Umsetzen auf die Toilette

Wie der Name schon sagt, ist das Toilettenhebetuch speziell für den Toilettengang konzipiert. Im Bereich der Sitzfläche hat das Hebetuch eine große Aussparung, so dass die Sitzfläche und der untere Teil des Rückens frei bleiben. Die Hose des Benutzers kann

entfernt werden, während die Person in dem Hebetuch sitzt. Das Toilettenhebetuch ist mit einem Bauchgurt ausgestattet, der zur zusätzlichen Sicherheit und Unterstützung mit einem Klettband geschlossen wird. Das Hebetuch gibbts auch mit Kopfstütze und ist einfach anzubringen.

③ Das Badehebetuch

Für den Einsatz im Bad

Das Badehebetuch ist in der Form identisch mit dem Toilettenhebetuch. Lediglich das Material ist unterschiedlich, da das Badehebetuch aus einem Antislip-Kunststoff besteht, was das Abtrocknen einfacher macht. Das Badehebetuch kann auch im Trockenbereich z.B. als Toilettenhebetuch genutzt werden.

④ Das Kokon-Hebetuch

Für ein geborgenes und sicheres Gefühl

Wie der Name schon vermuten lässt, umschließt das Kokon-Hebetuch den Körper mehr als das Standard-Hebetuch und gibt deshalb ein nochmals gesteigertes Gefühl von Sicherheit und mehr Unterstützung. Seine gepolsterten Beinlaschen sind weich und bieten eine weitere Unterstützung.

⑤ Das Amputationshebetuch

Abhängig von der Art der Amputation hat Handi-Move verschiedene Hebetücher entwickelt, die bequem sind und den Körper perfekt im Gleichgewicht halten.



Übersicht	Mondformige Kopfstütze	Abklappbare Kopfstütze	Netz	Vollstuf	Polster.	kn. Polst.	XS	S	M	L	XL
Standard	X		X		X		3433	3430	3431	3432	3434
		X	X			X	3435	3436	3437	3438	3439
		X		X		X		3423	3424	3425	
			X		X			3480	3481	3482	
	X		X			X		3483	3484	3485	
	X			X		X		3486	3487	3488	
Kokon	X		X		X			3450	3451	3452	
Toilet			X		X		3474	3460	3461	3462	3475
Bade (pvc)							3476	3463	3464	3465	3477
Low back			X		X			3490	3491	3492	
Toiletten	X		X		X			3414	3415	3416	
Verlängerungsband									3466		
Bade (pvc)	X					X		3417	3418	3419	
Gehgurt				X				3470	3471	3472	
Badesitz (pvc)									3473		
Amputation - 1			X		X			3493	3494	3495	
Amputation - 2			X			X			3496		

ALLE HEBETÜCHER OHNE LATEX
SPEZIELL ENTWORFENE HEBETÜCHER SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

Einseitige Amputation

Für Personen mit einer einbeinigen Amputation ist das Hebetuch mit längeren Beinlaschen die ideale Unterstützung und hält den Körper perfekt im Gleichgewicht.

Doppelte Amputation

Für Personen mit einer doppelten Amputation wird ein angepasstes rechteckiges Hebetuch benutzt. Dieses Hebetuch verfügt über keine Kopfstütze.

⑥ Der Badesitz

Der Handi-Move Badesitz wird aus Kunststoff hergestellt. Er ist zur Nutzung von Menschen entworfen, die noch stehen können aber Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben. Dieser kleine Stuhl kann in Pflegeheimen, zu Hause oder während der Rehabilitation benutzt werden. Der Benutzer sitzt in einer Position von 90 Grad, wobei der Rücken vollkommen unterstützt wird. Der perforierte Sitz lässt Wasser durchlaufen. Der Badesitz senkt bis auf den

Boden der Badewanne ab und passt sich deren Form an. Dieser Badesitz ist an allen Handi-Move Liftern einsetzbar und kann in verschiedenen Positionen verstellt werden. Ein Sicherheitsgürtel ist eine zusätzliche Option für Menschen, die im Sitzen schlecht die Balance halten können. Der Badesitz ist außerdem sehr pflegeleicht.

⑦ Der Gehgurt Unterstützung bei Rehabilitationsübungen

Der Gehgurt wird als Gehhilfe bei der Rehabilitation eingesetzt. Er dient bei Kraftverlust in den Beinen als Unterstützung. Der Gehgurt kann individuell an den Körperbau des Patienten angepasst werden. Er kann an Schultern und Bauch, um die Brust und an den Beinen individuell eingestellt werden. Der Gehgurt ist in drei Größen: klein (S), mittel (M) und groß (L) lieferbar.



Handi-Einhängevorrichtung

FÜR EINE SICHERE AUFHÄNGUNG

Wenn der Einsatz des Hebebügels nicht möglich ist, wird der Patient mit einem Hebetuch angehoben. Das Hebetuch wird dabei mit Schlaufen an einer Einhängevorrichtung befestigt. Wegen der ergonomischen Formgebung und den Proportionen hängt das Hebetuch so an der Einhängevorrichtung, dass das Körpergewicht perfekt und gleichmäßig verteilt wird.

Perfekte Druckverteilung


Das Hebetuch wird an vier verschiedenen Punkten an der Einhängevorrichtung befestigt und kann den Patienten sowohl in liegender, wie in sitzender oder zurücklehrender Haltung anheben. Diese Haltung wird durch den Einsatz der kurzen oder langen Schlaufen bestimmt, die an dem Hebetuch befestigt sind. Durch die Befestigung des Hebetuches an vier unterschiedlichen Punkten wird Platz für eine bequeme Sitzposition geschaffen. Die Einhängevorrichtung hat eine gebogene Form, wodurch das Blickfeld des Patienten nicht beeinträchtigt wird. So kann er die Handgriffe der Pflegeperson selbst verfolgen. Die gebogene Form lässt außerdem mehr Platz für den Kopf des Patienten.

Schnell und sicher anzubringen


Das Anbringen und Entfernen des Hebetuches erfolgt einfach, schnell und sicher, was Zeit und Aufwand bei den Pflegepersonen spart.

Ein Lifter, zwei Systeme


Mit dem Einhängevorrichtung Klassisch oder der Handi-Einhängevorrichtung Kombi ist es möglich, schnell zwischen dem Hebebügel und dem Hebetuchsystem hin und her zu wechseln.

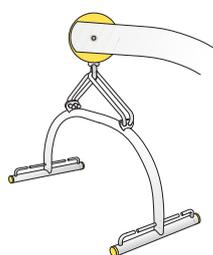

Kombi
mit Haken an der Ringmutter befestigt

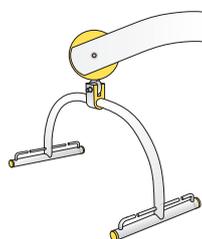

Standard
direkt an der Ringmutter befestigt

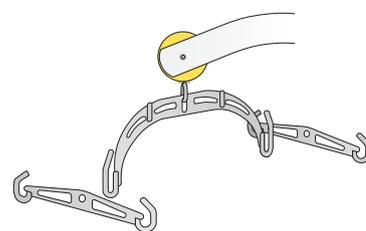

Klassisch

	einfach wechselbar	beschichtet	Edelstahl
KOMBI (4-Punkt Joch)	•		•
STANDARD (4-Punkt Joch)			•
KLASSISCH (2-Punkt oder 4-Punkt Joch)	•	•	



Der Patientenlifter Victor von Handi-Move ist ein mobiler Lifter, der sowohl im privaten Umfeld als auch für den professionellen Einsatz geeignet ist. Seine starke Konstruktion aus Aluminium eignet sich für eine langfristige und intensive Nutzung.




Der mobile Lifter Victor

HILFSMITTELNUMMER 22.40.01.0016

EIN STARKER HELFER

Anheben aus allen möglichen Positionen

Der große Hubbereich des Victor macht einen variablen Einsatz wie das Heben vom Boden oder das Heben auf ein hohes Bett möglich. Sein niedriges Fahrgestell kann unter das Bett oder die unterfahrbare Badewanne geschoben werden, was das Hebeverfahren besonders einfach macht. Da der Patient bis aufs Bett gehoben wird, erfordert dies weniger Anstrengung fürs Pflegepersonal und ist auch komfortabler für den Patienten.

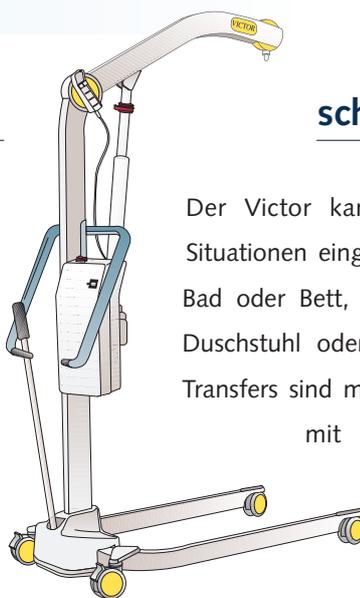

Einsetzbar in unterschiedlichen Situationen

Der Victor kann in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden: In und aus dem Bad oder Bett, sowie auf und vom Roll- oder Duschstuhl oder auf die Toilette. Nahezu alle Transfers sind möglich. Er ist variabel einsetzbar mit dem Hebebügel oder mit Hebetüchern.



Langlebige Konstruktion

Der Victor wird aus Aluminium hergestellt, wodurch das Gerät wartungsfreundlich und korrosionsbeständig ist, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Für den regelmäßigen Einsatz

Die komplett aufgeladenen Batterien können ca. 120 Hubbewegungen ausführen. Eine Ladung genügt für eine intensive Nutzung im Tagesbetrieb.



Wendig und anwenderfreundlich

Das Fahrgestell des Victor kann in der Breite von einem Minimum von 630 mm bis zu einem Maximum von 1170 mm verstellt werden. Enge Durchgänge bedeuten deshalb kein Problem. Wegen des kurzen Fahrgestells ist der Victor besonders wendig. Der Victor kann Personen bis zu maximal 160 kg Gewicht anheben.

Extra grosse Beinfreiheit

Der Victor ist so gebaut dass der Patient einen großen Freiraum für seine Beine hat, somit wird ein Anstoßen am Liftermast weitgehend vermieden.

Praktische Doppelbedienung

Der Victor kann über die pneumatische Handbedienung oder über den benutzerfreundlichen Schalter am Lifter bedient werden. Die ergonomischen Handgriffe ermöglichen eine bequeme Bedienung für alle Körpergrößen. Das Ladegerät ist eingebaut und kann somit nicht verlegt werden bzw. runter fallen.



Mechanische Notabsenkung

Als zusätzliche Sicherheit ist eine selbstständig zu bedienende mechanische Notabsenkung vorhanden.





Die Reihe der mobilen Lifter (Modelle 1640, 1641 und 1630) von Handi-Move stellt eine zuverlässige und kostengünstige Alternativlösung dar, welche sich hervorragend für den privaten Einsatz eignet. Das ganze Konzept dieser mobilen Liftertypen ist nämlich an die Bedingungen im privaten Wohnbereich angepasst.



Der mobile Lifter 1640/1641/1630

EIN ZUVERLÄSSIGES UND KOSTENGÜNSTIGES HEBESYSTEM

Großer Hubbereich


Durch den großen Hubbereich ist es diesen Geräten möglich aus nahezu allen Positionen und Ebenen, sowohl von einem hohen Bett wie auch vom Fußboden anzuheben. Der Lifter Typ 1640 ist ein ausgezeichnete Partner bei der Therapie. Er kann mit einem Handi-Move Hebebügel und den Hebetüchern aus dem Lieferprogramm von Handi-Move eingesetzt werden.

Angepasst an die häusliche Situation

Das Fahrgestell des mobilen Lifters 1640 ist in der Breite verstellbar, so dass das Gerät ohne Probleme durch schmale Türöffnungen fährt, was im privaten Wohnbereich erforderlich ist. Ferner sorgt das kurze Fahrgestell dafür, dass dieser mobile Lifter äußerst wendig ist. Da das Fahrgestell nur 110 mm hoch ist, kann dieser mobile Lifter unter beinahe jedes Bett geschoben werden. Nur wenn sich das Fahrgestell unter dem Bett befindet, kann ein Patient auf das Bett gehoben werden, was wesentlich komfortabler für ihn und dem Pflegepersonal ist.

Kräftig und praktisch

Bei kompletter Ladung der Batterien können bis zu 120 Hubvorgänge ausgeführt werden. Die mobilen Lifter der Serie 1630-1640 können Personen bis zu 175 kg heben, 1641 bis 200 kg. Die Batterien befinden sich in einem abnehmbaren Steuerkasten.

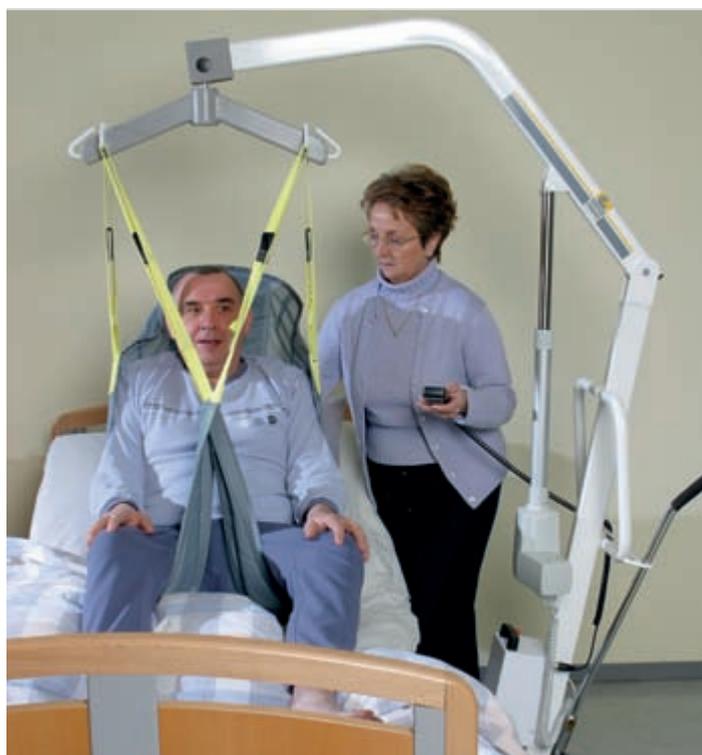

Der Lifter muss also nicht extra positioniert werden, um die Batterien aufzuladen. Die Batterien werden mit dem tragbaren Steuerkasten dort aufgeladen, wo z.B. der Ladevorgang am wenigsten stört. Außerdem ist es möglich als Option einen zweiten Steuerkasten mit Batterien einzusetzen, so dass ein durchgehender Betrieb des Lifters ohne Ladeunterbrechung möglich ist.

Mechanische Notabsenkung

Als zusätzliche Sicherheit ist eine mechanische Notabsenkung vorgesehen. Diese macht es möglich, den Hubarm des Lifters manuell abzusenken, falls das Gerät durch einen Defekt blockiert wird.

Doppelbedienung

Der mobile Lifter kann per kabelgeführtem "Fernschalter" bedient werden oder über einen Wippschalter direkt am Steuerkasten des Lifters. Für den Fall einer Unterbrechung der Stromzufuhr, ist als zusätzliche Sicherheit eine manuelle mechanische Notabsenkung vorgesehen.



Benutzer, die zwar selbst stehen können, aber zu wenig Muskeltonus besitzen und sich daher nicht einfach von einer sitzenden in eine stehende Position und umgekehrt bewegen können, haben jetzt mit dem aktiven mobilen Lifter die Möglichkeit, schnell und bequem zur Toilette zu gehen.



Der aktive mobile Lifter 1620

SCHNELL AUF DIE TOILETTE!

Mühelos An- und Auskleiden

Der große Vorteil des Aktivlifters ist, dass der untere Teil des Körpers frei bleibt, damit der Betreuer den Patienten mühelos an- und auskleiden kann. Durch ein Hebetuch im Rücken und unter den Armen unterstützt, wird der Benutzer in eine aufrechte Position gebracht. Dieses aktive Hebetuch kann schnell und bequem angebracht werden, ohne die Schultern zu viel zu belasten. Das System ist so entwickelt, dass es dem Körper möglichst viel Unterstützung bietet ohne die Schulterlinie zu belasten. Der Aktivlifter ist auch ein hervorragendes Hilfsmittel, wenn man mit Patienten arbeitet, die an Inkontinenz leiden.

Unterstützung und Gleichgewicht

Man stellt die Füße des sitzenden Benutzers auf das Fußbrett. Beim Heben und Weiterfahren werden die Unterschenkel des Benutzers von den verstellbaren Beinstützen mit Wadenband unterstützt. Damit erreicht man, dass der Körper während des Hebens und Stehens im Gleichgewicht bleibt.

Kompakt und beweglich In kleinen Räumen

Der Aktivlifter ist in kleinen Räumen einfach zu bedienen, weil das U-förmige Fahrgestell sehr kurz ist. Das Fahrgestell kann auch in der Breite angepasst werden, damit der Lifter ohne weiteres nahe an Rollstühle oder geriatrische Stühle herangefahren werden kann.




Gerade weil der Aktivlifter so kompakt ist, eignet er sich hervorragend für Transfers in kleinen Räumen wie Badezimmern und Toiletten.

Steuerkasten mit integriertem und austauschbarem Batteriekasten

Der Aktivlifter wird von einer Batterie betrieben, die sich in einem abnehmbaren Batteriekasten befindet. Sie können den Batteriekasten vom Ladegerät entfernen und durch eine aufgeladene Batterie ersetzen. Man kann auch den Batteriekasten auf dem Lifter lassen und aufladen, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Eine LCD-Anzeige warnt, wenn es Zeit ist, die Batterie aufzuladen. Mit einer vollen Batterie kann man etwa 40 Mal heben.

Falls Sie den Aktivlifter ständig benutzen, ist der austauschbare Batteriekasten die ideale Lösung: Die eine Batterie wird aufgeladen, während die andere im Einsatz ist.

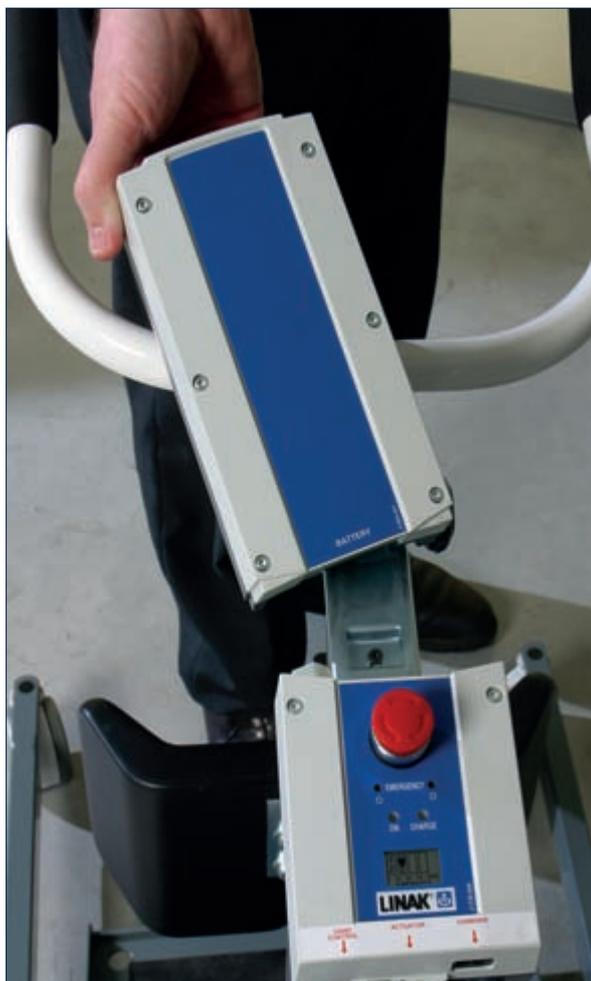

Träumen Sie davon, sich in Ihrer Wohnung frei von Hindernissen bewegen zu können? Dann ist der Deckenlifter die ideale Lösung für Sie.



HILFSMITTELNUMMER 22.40.03.0010

Der Deckenlifter

FREIE BEWEGUNG OHNE HINDERNISSE

Deckenlifter mit Fahrtrieb: Ideal für autonomes Wohnen

Über Schienen können Sie sich mit diesem Deckenlifter ungehindert und autonom durch Ihre Wohnung vom Schlaf- ins Wohn- oder ins Badezimmer bewegen. Der Transport erfolgt ziemlich geräuschlos und mit "weichem" Start und "weichem" Stop. Das System kann Sie auch vom Boden hochheben.

Deckenlifter ohne Fahrtrieb: Eine einfache Lösung für die Pflegerpersonen

Der Deckenlifter ohne Fahrtrieb macht es möglich, einen Patienten per Motorkraft zu heben und entsprechend der Schienenführung durch leichtes Schieben in der Schiene zum Bett, zur Toilette oder zur Badewanne zu transportieren und am gewünschten Punkt abzusetzen.

Der Deckenlifter kann mit dem Handi-Move Hehebügel und allen Handi-Move Hebetüchern

benutzt werden. Auf diese Weise kann er immer und bei den verschiedensten Behinderungen und Krankheitsbildern eingesetzt werden.

Die Deckenlifter arbeiten mit aufladbaren Batterien und sind für 200 kg Hebeleistung zugelassen. Der Deckenlifter eignet sich auch bestens zur Durchführung von Rehabilitationsübungen.



Lösungen nach Maß

Der Deckenlifter in Kombination mit unterschiedlichen Schienensystemen bietet für jede Situation eine maßgeschneiderte Lösung. Der Raum wird über die gesamte Länge und Breite hin erreichbar und man kann damit auch mehrere Zimmer miteinander verbinden. Der große Vorteil des Schienensystems mit Deckenlifter ist, dass man sich ungehindert durch Möbel oder Türschwellen überall frei bewegen kann.

Unauffälliges Erscheinungsbild

Die hellgraue Ausführung und das schlichte, ästhetische Design passt in jedes Interieur.

Mechanische Notabsenkung und Direktsteuerung

Als zusätzliche Sicherheit wurde eine selbstständig zu bedienende mechanische Notabsenkung und eine direkte Steuerung am Gerät angebaut.

Heben und Umsetzen mit Betreuung

Der Deckenlifter vom Typ HM2500 und HM2500 RC sind für die betreute Nutzung bestimmt. Beide Gerätetypen werden in der Schiene manuell verschoben. Der HM2500 arbeitet mit einer pneumatischen Druckknopfbedienung, der HM2500 RC mit Infrarot-Fernbedienung.

Deckenlifter für die selbstständige Nutzung

Die Deckenlifter vom Typ HM2500 L und HM2500 LRC sind mit einem elektrischen Fahrtrieb ausgestattet und somit für die selbstständige Nutzung ausgerichtet. Der HM2500 L arbeitet mit einer pneumatischen Druckknopfbedienung, der HM2500 LRC mit Infrarot-Fernbedienung.

Automatische Zwischenstops auf der Schiene

Durch die mitgelieferten Magnetkontakte kann man den Deckenlifter mit Fahrtrieb an festgelegten Stellen anhalten lassen. Zum Beispiel auf der Ladestation, am exakten Absetzpunkt der Toilette, Bett, usw.





Ein tragbarer Umhängelifter ist eine flexible Lösung für das Heben in Räumen, die zu klein für einen mobilen Lifter oder einen Wandlifter sind. Er ist auch ideal für die Nutzung in unterschiedlichen Räumen oder beim Patientenbesuch an verschiedenen Orten. Tragbar bedeutet dabei auch: leicht und handlich.



Der Umhänge-Deckenlifter

ÜBERALL EINSETZBAR

Der Einsatz an verschiedenen Orten

Bei den Großeltern zu Besuch? Kein Problem: Der tragbare Umhängelifter wird einfach mitgenommen, so dass Oma und Opa ihren Enkel ohne Anstrengung heben und versorgen können.

Einzig Voraussetzung ist die Installation einer Schiene, dort wo der Motor eingesetzt werden soll. Mit seinem ergonomischen Handgriff und seinem Gewicht von 7 kg ist der Transport des Umhängelifters kein Problem.

Transfer in kleinen Räumen

In kleinen engen Räumen ist der Einsatz eines mobilen Patientenlifters aus Platzgründen sehr schwierig oder ein Manövrieren überhaupt nicht möglich, so dass die Kombination einer Schiene mit einem tragbaren Deckenlifter die perfekte Lösung ist.

Die Vorzüge des tragbaren lifters

Leicht und kompakt

Der tragbare Umhängelifter ist mit 20 cm Höhe sehr klein, so dass beim Anheben nur wenig Höhe verloren geht. Bei niedrigen Decken ist dies ein besonderer Vorteil. Mit seinen kompakten Dimensionen ist er auch gut zu verstauen und kann mit seinen knapp 7 kg Gesamtgewicht ohne Probleme an seinem ergonomischen Handgriff getragen werden.

Leistungsfähige Batterien

Der tragbare Motor arbeitet auf Batteriebasis und hat eine Hubkraft von 182 kg. Die Batterien besitzen eine lange Lebensdauer und der Batteriebetrieb vermittelt beim Einsatz im Badezimmer oder im Schwimmbad ein sicheres Gefühl.

Zweifachbedienung als zusätzliche Sicherheit

Der tragbare Umhängelifter kann zum einen mit einer Kabelsteuerung und zum anderen über einen Wippschalter direkt am Gerät betätigt werden. Falls eine der beiden ausfallen sollte, gibt es somit immer noch eine zweite Bedienungsmöglichkeit.

Mit Notabsenkung

Über den kleinen gelben Knopf an der Unterseite des Gerätes lässt sich der Lifter ebenfalls absenken. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion.

Kostenfreundlich und vielseitig

Der tragbare Umhängelifter kann mit dem Hebebügel "HelfendeHände" und allen Hebetüchern verwendet werden und ist aus diesem Grunde in vielen verschiedenen Situationen einsetzbar. Er kann ohne großen Aufwand und dabei schnell ein- und umgehängt werden. Da der tragbare Lifter an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden kann, bietet er für viele Benutzer eine finanziell interessante Lösung.

Von Raum zu Raum (Modell 2545)

Mit dieser Sonderversion ist der Transfer durch eine Türöffnung in den angrenzenden Raum möglich. Der Benutzer kann im Hebebügel oder Hebetuch bleiben. Ideal in kleineren Badezimmern oder an Stellen, wo der Türsturz nicht entfernt werden kann.





In Kombination mit einem Deckenlifter oder einem tragbaren Umhängelifter ist das Schienensystem von Handi-Move bestens für den Transfer einer pflegebedürftigen Person in der institutionellen Pflege oder zu Hause geeignet.



Deckeninstallationen

MÜHELOS VON EINEM INS ANDERE ZIMMER

Ästhetisch und geräuscharm

Die Schienen von Handi-Move sind aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt und somit stabil und korrosionsbeständig. Die Schienen haben eine gefällige Form, so dass das Bild ihrer Wohnung nicht negativ beeinflusst wird. Die Kunststoffräder in den Schienen sorgen dafür, dass sich die Geräuschentwicklung auf ein Minimum beschränkt.

Lösungen nach Maß

Bei Neubauprojekten führen die Spezialisten von Handi-Move mit Ihnen oder dem Architekten Gespräche, um ein Schienensystem perfekt in das Bauobjekt zu integrieren. Auch für bestehende Situationen hat Handi-Move sehr praktische und einfache Lösungen. Es gibt immer eine individuell maßgeschneiderte Lösung.

Die Schienen können direkt an der Decke oder von Wand zu Wand befestigt werden.



Klassische Aufhängung

Bei der klassischen Deckenmontage werden die Schienen mit Schienenhaltern direkt an der Decke befestigt. Der Abstand zwischen diesen Befestigungshaltern beträgt dabei ca. 1m. Dieses System kann auch bei einer abgehängten Decke benutzt werden. Die Schienen können in gerader Linie, in Kurven von 45 bis 90 Grad oder in einer Abfolge unterschiedlicher Elemente befestigt werden. Eine Kombination verschiedener Kurven und Weichen macht somit viele denkbare Lösungen möglich.

Verstärkte Schienen von Wand zu Wand

Falls eine Deckenbefestigung nicht möglich ist, kann mit einer verstärkten Wand-zu-Wand Schiene bis 7m freitragend das Problem gelöst werden. Sie sind auch dann die Lösung, wenn die Decke nicht stark genug ist, um als tragendes Element für die Schienen zu dienen.



Elektrische Schwenkweiche

PROBLEMLOS IN DREI VERSCHIEDENE RICHTUNGEN

Mit der elektrischen Schwenkweiche eröffnet sich die Möglichkeit, mit einem Deckenlifter innerhalb eines Raumes in drei verschiedene Richtungen zu fahren oder unterschiedliche Räume miteinander zu verbinden.



Elektrische Drehweiche

VIER MÖGLICHE FAHRRICHTUNGEN

Mit einer elektrischen Drehweiche kann man in vier verschiedene Richtungen fahren. Die Drehweiche kann manuell über Kabelsteuerung oder über eine Infrarotfernbedienung betätigt werden. Ideal, um an einer Stelle die Richtung zu verändern.



IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Die vielen verschiedenen Komponenten des Handi-Move Schienenprogramms bieten garantiert für jedes Problem die richtige Lösung. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne über alle Möglichkeiten.

Traversalschienen

BEWEGUNG IM GANZEN RAUM

Mit einer Traversal- bzw. Querschiene ist ein Raum über die gesamte Fläche bedienbar. Dieses System besteht aus zwei festen parallelen Tragschienen und einer beweglichen Querschiene, die über die gesamte Länge der parallelen Schienen bewegt werden kann. Dieses System kann überall dort perfekt eingesetzt werden, wo nicht mit Kurven (z.B. in schmalen Räumen) gearbeitet werden kann und/oder an vielen verschiedenen Punkten umgesetzt werden soll (z.B. im Pflegearbeitsraum).

Mit oder ohne Begleitung

Die manuelle Querschienenanlage kann sehr leicht von einer Hilfsperson in allen Richtungen verschoben werden. Die elektrisch verfahrbare Anlage kann über eine 6-fach Infrarotfernsteuerung vom Nutzer autonom betrieben werden, d.h. dass der Benutzer selbständig auf und ab, nach rechts und links sowie vor- und rückwärts fahren kann.

Verbindungselement für Querschienen

Ein Verbindungselement für Querschienen ermöglicht es, eine Querschiene mit einer festen Schiene zu koppeln, so dass ein Transfer von einem ins andere Zimmer in einer fließenden Bewegung erfolgen kann. Dank eines eingebauten Sicherheitssystems kann der Deckenlifter nur dann durchfahren, wenn beide Schienen perfekt miteinander verbunden sind.







Der Bettstand ist eine perfekte Übergangslösung oder Lösung für Stellen, wo kein Deckenlifter montiert werden kann. Es sind verschiedene Versionen für die unterschiedlichsten Gegebenheiten erhältlich.



HILFSMITTELNUMMER 22.40.03.0010

Der Bettstand

EINE FLEXIBELE LÖSUNG

Dieses einfache System ermöglicht einen Transfer in zwei Richtungen. Die soliden und stabilen Stützen sind

in verschiedenen Höhen und Stärken erhältlich. Der Bettstand kann in Kombination auch mit dem (tragbaren) Deckenlifter eingesetzt werden.





Der Wandlifter von Handi-Move bietet eine ideale Lösung für kleine Räume, wo der Einsatz von mobilen Liftern unmöglich ist. Seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten und sein niedriger Preis machen ihn zu einer bevorzugten Lösung.



HILFSMITTELNUMMER 22.40.02.0003

Der Wandlifter

DIE PREISWERTE UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR KLEINE RÄUME

Kleine Räume?

Der Wandlifter wird sehr oft in kleinen Räumen wie zum Beispiel im Badezimmer eingesetzt, wo er zwischen Badewanne und Toilette positioniert wird. Sein ausziehbarer Schwenkarm bietet dabei verschiedene Varianten und einen großen Hubbereich.

Niedrige Decken? Schwache Wände?

Bestehende Wohnungen haben oftmals technische Begrenzungen, die Anpassungsarbeiten für den Einsatz von bestimmten Hebelösungen erfordern. Dies ist beim Wandlifter nicht der Fall, der buchstäblich überall befestigt werden kann. Selbst wenn die Wand nur unzureichend tragfähig ist, kann mit einer Gegenplatte oder über eine Boden-Decken-Säule eine Montage erfolgen.



Formschön und praktisch

Eine ästhetische Formgebung und seine kompakten Dimensionen sorgen dafür, dass der Wandlifter sehr unauffällig ist. Der teleskopische Schwenkarm kann zur Seite bewegt und verkürzt werden, sodass er sehr wenig Platz benötigt.

Einfach umzuhängen

Der tragbare Wandlifter kann an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden, so dass Sie mit nur einem Lifter sowohl im Bade- als auch im Schlafzimmer oder jedem anderen Raum arbeiten können.

Der Wandlifter kann sowohl mit dem Hehebügel als auch mit allen Hebetüchern eingesetzt werden.



Die Vorzüge des Wandlifters

- **Unterschiedliche Möglichkeiten zur Befestigung**

Die Wandplatte kann direkt an die Wand oder an eine Boden-Decken-Säule montiert werden. Mit einer zusätzlichen Rotationsverlängerung kann die Reichweite des Schwenkbereiches vergrößert bzw. verkleinert werden.

- **Kräftig**

Der Wandlifter kann Personen bis zu 145 kg anheben.

- **Betrieb über das Stromnetz**

- **Sicher**

Der Wandlifter hat einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, wobei ein Hindernis beim Absenken den Lifter zum Halten bringt. Die pneumatische Handbedienung ist wasserresistent und erlaubt einen Einsatz in Nassräumen.



Mit dem Schwimmbadlifter ist es ein kleiner Schritt vom Rollstuhl ins Schwimmbecken. Das Hebesystem bringt den Benutzer in einer einfachen Bewegung ins und aus dem Wasser, wobei ein Begleiter genügt. Dieses elektromechanische Hebesystem ist mobil und arbeitet mit wiederaufladbaren Batterien. Nach dem Einsatz kann es wieder leicht entfernt werden.



Der Schwimmbadlifter


VOM ROLLSTUHL INS SCHWIMMBECKEN

Benutzerfreundlich

Der mobil einsetzbare Schwimmbadlifter ist kompakt, ergonomisch ausgefeilt und Dank seiner vier Räder leicht zu bewegen. Die Installation ist besonders einfach.

Mit einem Druck auf den Bedienschalter senkt sich der Drehdorn in die Bodenhülse und der Hebearm wird auf die gewünschte Höhe hochgefahren. Die Bedienung ist komplett elektronisch.

Die Wiederaufladung der Batterien erfolgt an einem normalen Stromanschluss.

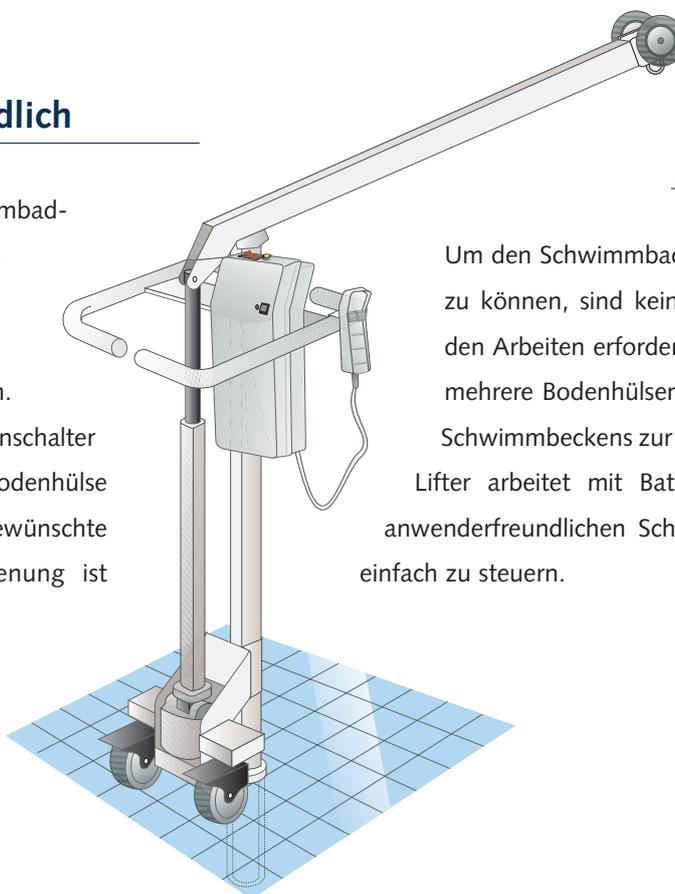

Schnell einsatzbereit

Um den Schwimmbadlifter schnell einsetzen zu können, sind keine großen vorbereitenden Arbeiten erforderlich. Lediglich ein oder mehrere Bodenhülsen müssen am Rand des Schwimmbeckens zur Verfügung stehen. Der Lifter arbeitet mit Batterien und Dank des anwenderfreundlichen Schaltkasten ist der Lifter einfach zu steuern.

Sicher ins und aus dem Wasser

Der mobile Schwimmbadlifter ist aus robustem Edelstahl gefertigt und trotzdem leicht im Gewicht. Das Gerät ist durch den Einsatz von Batterien als Energiequelle in Wassernähe vollkommen sicher und ein Notausschalter ermöglicht schnell jede Bewegung des Hubarms zu unterbrechen. Der Hubarm ist sehr flexibel und hat einen Drehbereich von 360°.



Große Mobilität

Der Schwimmbadlifter kann ohne großen Kraftaufwand an seinen Einsatzort gerollt und dort in der eingesetzten Bodenhülse abgesenkt zu werden.

Der Deckenlifter als Schwimmbadlifter

Außer dem mobilen Schwimmbadlifter bietet Handi-Move auch seine Deckenlifter als alternatives Hebeseystem für das Schwimmbad an. Der Hebelifter bewegt sich über eine Schiene und ist hervorragend geeignet für eine intensive Nutzung.





Handi-Move hat eine Serie von Hebe- und Transferlösungen entwickelt, die kleinere Umlagerungs- oder Positionsveränderungen im Bett vereinfachen und leichter machen. Alle diese handlichen Hilfen sind unter einer Rubrik zu finden: Die Handi-Umlagerungshilfen.



Handi-Umlagerungshilfen


HANDLICHE HELFER FÜR KLEINE UMLAGERUNGEN

Weniger Reibungswiderstand


Die Handi-Umlagerungshilfen machen eine Umlagerung von Patienten einfacher, indem sie den Reibungswiderstand auf ein Minimum begrenzen. Das Resultat: Der Rücken der Hilfsperson wird geschont und man braucht weniger Kraft um eine pflegebedürftige Person zu verlagern. Insbesondere bei der Anwendung von besonderen Unterlagen wie weichen Matratzen, Wasserbetten und Antidekubitusmatratzen beweisen die Handi-Umlagerungshilfen ihren großen Nutzen. Einige Handi-Gleitlaken erhöhen auch die Autonomie von Rollstuhlfahrern und ermöglichen es, dass ein Transfer vom Rollstuhl auf die Toilette oder vom Rollstuhl ins Auto ohne Hilfe erfolgen kann.

Maschinenwaschbar

Alle Handi-Umlagerungshilfen sind maschinenwaschbar, was sie sehr wartungsfreundlich und hygienisch macht.

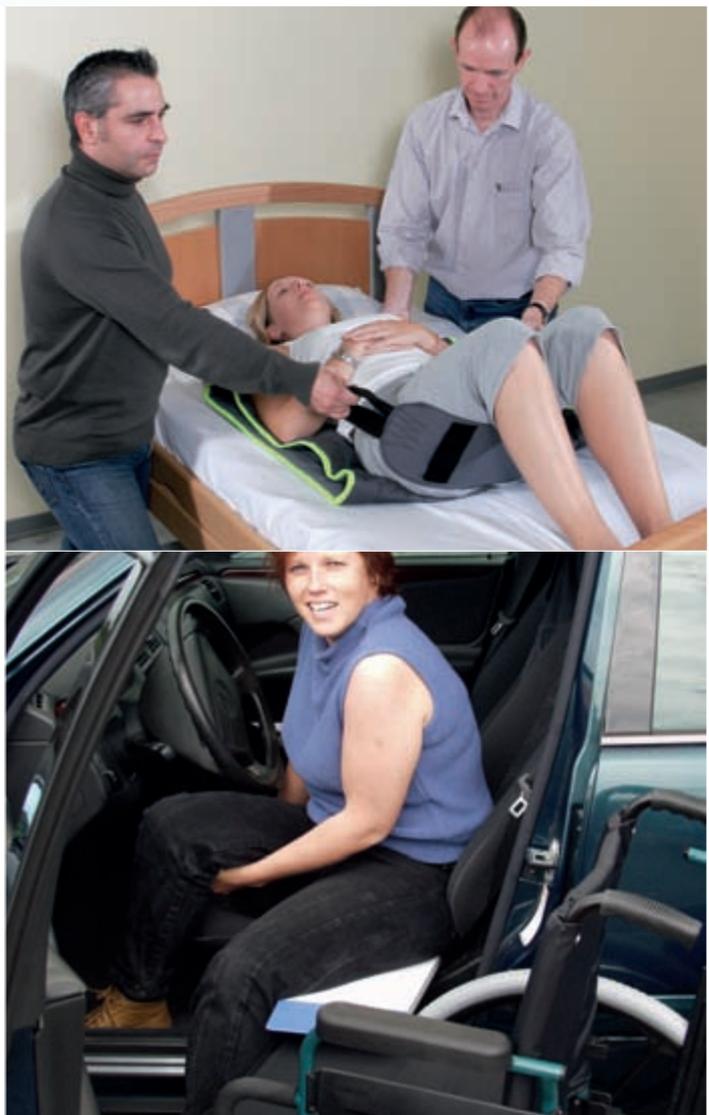

Das Gleitlaken

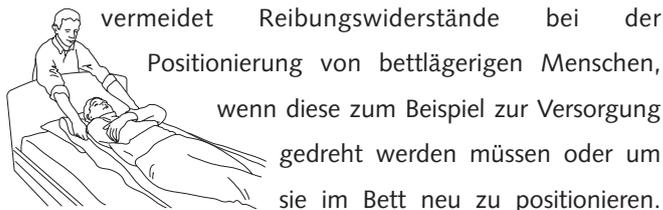

vermeidet Reibungswiderstände bei der Positionierung von bettlägerigen Menschen, wenn diese zum Beispiel zur Versorgung gedreht werden müssen oder um sie im Bett neu zu positionieren. Dank des Gleitlakens erfordern solche Handlungen für die Pflegekraft weniger Kraftaufwand.

Das Handi-Einbahngleitlaken



trägt zum Komfort des Patienten bei und vermeidet, dass er aus seinem Bett, Sessel oder Stuhl nach vorne wegrutscht. Dies erspart den Pflegenden viel Zeit und Mühe und beugt Verletzungen beim Patienten vor.

Die Handi-Gleitmatte



ist vergleichbar mit dem Gleitlaken. Diese Matte ist mit einer weichen Polsterung beschichtet. Sie hilft eine Verlagerung auf weichen Matratzen zu vereinfachen. Dies ist ein ideales Hilfsmittel bei einem horizontalen Transfer mit einem leichten Niveau-Unterschied wie zum Beispiel beim Transfer vom Bett auf eine Krankentrage.

Das Rollbord



wird hauptsächlich für den Transfer von Bett zu Bett, Bett zu Duschtrage usw. verwendet. Der Patient liegt während des Transfers auf dem Rollbord, wobei seine Lage nicht von eventuellen Unebenheiten beeinträchtigt wird.

Das Handi-Rutschbrett



ist ein Hilfsmittel, dass bei einem Transfer zwischen zwei gleich hohen Objekten eingesetzt wird. Es ist hauptsächlich für eine autonome Nutzung vorgesehen, um zum Beispiel vom Rollstuhl ins Auto zu gelangen oder um

vom Zimmer auf den elektrischen Rollstuhl umzusteigen. Auch das Umsteigen zwischen Bett und Sessel oder Stuhl verlaufen dank des Handi-Rutschbrettes einfacher.

Die Handi-Drehscheibe

wird auf dem Boden positioniert und ermöglicht es, eine Person mit einer Drehung zu verlagern. So werden Torsionsmomente in den Knien und im Rücken vermieden. Die Drehscheibe kann auch in Kombination mit einem Sicherheitsband benutzt werden.



Das Handi-Rotationskissen

ist ein ideales Hilfsmittel für weniger mobile Menschen und Rollstuhlbenutzer, die sich selbst nur schwer drehen können, um z.B. ins oder aus einem Auto zu gelangen. Es kann zum Beispiel auch auf dem Bettrand positioniert werden, um das Aufstehen zu erleichtern.




Der Halte- und Führungsgurt

ist für eine vollkommene oder teilweise Unterstützung des Patienten bei Verlagerungen vorgesehen. Diese Gurte sind in zwei verschiedenen Versionen lieferbar:

1. der offene Haltegürtel bietet eine ideale Lösung, wenn z.B. im Bett die Beine angehoben werden oder in Kombination mit einem Gleitlaken, der Patient höher oder tiefer gelagert werden muss.

2. der geschlossene Halte- und Führungsgürtel ist ideal für den Einsatz bei Gehübungen.

Dieser Gürtel, der um die Mitte des Körpers befestigt wird, ist mit zwei Handgriffen versehen. Dies gibt der Hilfsperson die Möglichkeit, den Patienten besser zu begleiten und ein eventuelles Durchsacken auf eine ergonomisch zu verantwortende Weise aufzufangen.

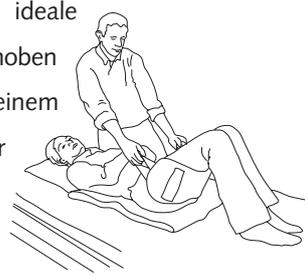

Dieser einzigartige Badetrolley läßt sich zum einen als Badewanne aber auch als höhenverstellbare Pflegeliege nutzen.



Dusch- und Badetrolley

BADEN, PFLEGEN, UNTERSUCHEN, TRANSPORTIEREN MIT KOMFORT

Duschen

Der Rand des Dusch- und Badetrolleys kann elektrisch angehoben und gesenkt werden, damit der Patient einfach und komfortabel duschen kann.



Baden

Möchte man ein Bad nehmen, kann man den Rand noch höher stellen, sodass man ein seichtes Bad bekommt.





Umkleiden (An- und Auskleiden)

Die Liegefläche des Dusch- und Badetrolleys ist weich und eben, wodurch der Transfer von Rollstuhl, Tragbahre oder Bett ermöglicht wird. Das komplette Dusch- und Badetrolley kann auch noch abgesenkt werden, sodass es sich in Höhe eines Rollstuhls befindet. Nachdem man den Patienten auf das Dusch- und Badetrolley gelegt hat, hebt man einfach den Rand an und der Patient kann sicher transportiert werden.

Auf- und Niederfunktion

Alle Verstellfunktionen sind batteriebetrieben und ermöglicht es dem Pfleger, den Patienten in die gewünschte Höhe zu bringen. Das Dusch- und Badetrolley kann so abgesenkt werden, dass einige Patienten selbst darauf Platz nehmen können. Die höchstzulässige Tragkraft des Dusch- und Badetrolleys beträgt 220 kg.



Mit dem Transportwagen kann der Umhänge- Deckenlifter zusammen mit dem eingesetzten Hebemittel (z.B. dem Hebebügel "Helfende Hände") bequem transportiert sowie ein- und ausgehängt werden.



Transportwagen für Umhänge-Deckenlifter

EINE ERGONOMISCHE LÖSUNG FÜR DEN PFLEGER

Der Transportwagen ist zum einfachen Aushaken und Transportieren des tragbaren Umhänge-Deckenlifters mit einem Haken in ergonomischer Höhe ausgestattet (mit Hebebügel oder Hebetuch).

Der Transportwagen ist kompakt, einfach zu warten und aus Edelstahl hergestellt.





Das Wiegen einer Person mit einer mobilen Einschränkung ist meist sehr problematisch. Deshalb bieten wir Ihnen diese separate digitale Lifterwaage gemäß Klasse III in Kombination mit Ihrem Handi-Move Hebeseystem an. Wiegen war noch nie so einfach.



Die Waage

WIEGEN UND HEBEN IN EINER BEWEGUNG

Universell einsetzbar

Die Waage kann fast an allen Handi-Move Hebeseysteme eingehängt werden. Sie befindet sich dann zwischen dem Drehnagel und dem Hebemittel (Hebebügel oder Einhängvorrichtung). Die Befestigung ist einfach und mit einer Schraube gesichert. Der Benutzer kann die Waage am Hebeseystem hängen lassen oder an Kollegen weitergeben. Das ist insbesondere bei mehreren Abteilungen interessant.

Bauweise

Die Waage ist klein aber kompakt und sehr leicht. So kann man sie gut handhaben.

Genau

Unter bestimmten Umständen ist es wichtig und auch medizinisch erforderlich, das Gewicht eines Patienten genau zu verfolgen. Die Gewichtsanzeige erfolgt in 100g Schritten und wird auf diese Weise jedem Bedürfnis gerecht. Das Gewicht erscheint auf einer LCD-Anzeige.

Benutzerfreundlich

Die Waage hat nur zwei Druckknöpfe: An/Aus und die Null-Tarierung. Die letzte Einstellung ist erforderlich, um das Patientengewicht ohne dem Hebemittel zu bekommen. Wenn das Gerät nicht verwendet wird schaltet es automatisch ab. Die Batterien werden dadurch geschont.



Handi-Move

Ein starkes Programm

Kostenlose Beratung

Handi-Move verfolgt das Prinzip, dass eine gute Beziehung zum Kunden mit optimaler Information beginnt. Deshalb stellen alle unsere Mitarbeiter gerne ihr Wissen kostenlos zu Ihrer Verfügung, wo und wann dies immer möglich ist.

Klare Absprachen

Handi-Move will, dass Sie auch nach dem Kauf ein zufriedener Kunde sind. In seinem Angebot gibt Ihnen deshalb der Handi-Move Berater ein ganz genaues Bild von dem, was Ihre Lösung ist und wie die Lieferung und Installation verlaufen wird.

Lösungen nach Maß


Zusammen mit Ihnen sucht der Handi-Move Berater nach dem Hebe- oder Versorgungssystem, das am besten ihren Bedürfnissen entspricht. Ein hauseigenes Team von Ingenieuren bietet die dazu notwendige technische Unterstützung. Wir entwickeln eine individuell maßgeschneiderte Lösung bei jeder neuen Anfrage.

Solide Garantien

Die Hebe- und Versorgungssysteme werden innerhalb unseres Betriebs strengen Tests unterworfen. Deshalb bietet Handi-Move für all seine Produkte die besten Garantiebedingungen.

Ein kompletter Kundenservice

Auch nach dem Kauf bleibt Handi-Move ein verlässlicher Partner. Die Lieferung, die Installation und die Wartung erfolgt jeweils durch unser hauseigenes technisches Team. Sie erhalten von uns eine umfangreiche Gebrauchsanweisung, sowie eine detaillierte Einweisung. Unsere Mitarbeiter sind immer für Sie erreichbar.

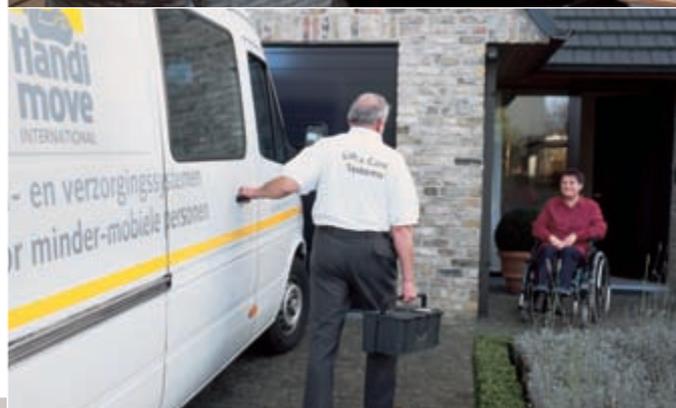

Ihre regionale Werksvertretung

Deutschland

Hans Armbruster

Koordinationsbüro D.A.CH
Bergsteig 5/1
72218 Wildberg
Tel.-Nr.: 07054-7178
Fax-Nr.: 07054-7743
info@handi-move.de

Gerhard Ausfelder

Jahrsdorf A 36-1
91161 Hilpoltstein
Tel.-Nr.: 09174-48931
Fax-Nr.: 09174-48932
ausfelder@handi-move.de

Frank Berger NBL-Süd

Wolfsgartenstr. 33
12555 Berlin
Tel.-Nr.: 030-652614-12
Fax-Nr.: 030-652614-13
berger@handi-move.de

Armin Braus

Denekamper Str. 113a
48529 Nordhorn
Tel.-Nr.: 05921-320437
Fax-Nr.: 05921-83951
braus@handi-move.de

Hans-Josef Bunzeck

Klinkgasse 4
52249 Eschweiler
Tel.-Nr.: 02403-65508
Fax-Nr.: 02403-64049
bunzeck@handi-move.de

Jens Kaven

Bergstraße 58
66919 Obernheim-Kirchenarnbach
Tel.-Nr.: 06375-5790
Fax-Nr.: 06375-5786
kaven@handi-move.de

Dipl.-Ing. Ansgar Lünne

Barmsteder Str. 51g
24568 Kaltenkirchen
Tel.-Nr.: 0 41 91/9 52 49-21
Fax-Nr.: 0 41 91/9 52 49-22
lunne@handi-move.de

Wolfgang Reimer

Schlewecker Str. 56
31167 Bockenem
Tel.-Nr.: 05067-6240
Fax-Nr.: 05067-6207
reimer@handi-move.de

Österreich

Rehatronik

Mühlwanger & Zeilinger OEG
Kirchengasse 6
3352 Sankt Peter/Au
Österreich
Tel.-Nr.: 07477 44 2 88
Fax-Nr.: 07477 44 5 88
office@rehatronik.at
www.rehatronik.at

Schweiz

SKS Rehab AG

Im Wyden
8762 Schwanden
Schweiz
Tel.-Nr.: 055 647 35 85
Fax-Nr.: 055 647 35 86
sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.ch



Hebehilfen für Menschen mit Handicap

Ihre Werksvertretung:

Weitere Werksvertretungen siehe Innenseite

www.handi-move.de